

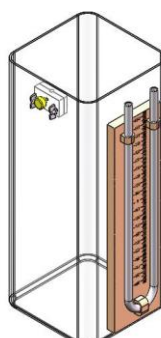
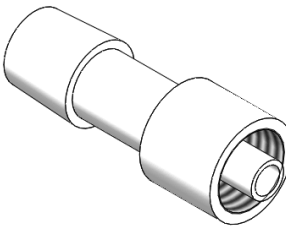
Инструкция по эксплуатации установки для измерения внутреннего давления жидкостей

Артикул: TP6032

Описание продукта

Установка определения внутреннего давления жидкостей состоит из аппарата для измерения внутреннего давления жидкостей (включая резиновую ленту), резервуара для воды и разъёма для датчика. Используется для исследования внутреннего давления жидкости и факторов, влияющих на него.

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Устройство для измерения внутреннего давления жидкостей		1	Один аппарат для измерения внутреннего давления жидкостей. Двухходовой клапан 3,2–6,4 мм. Один кусок трубки с силикагелем длиной 0,2 м. Одна часть трубки с силикагелем длиной 0,4 м. Т-образный трехходовой клапан 6,4 мм.
2	Резервуар для воды		1	Прямоугольный резервуар для воды (15*10*30 см)
3	Разъём для подключения датчика		1	Прозрачный коннектор Луэр 1/4. Используется для подключения к датчикам.

Таб.1

Экспериментальная установка



Рис.1

Этапы сборки

- Соберите установку, как показано на рис. 1.
- Установите оборудование в резервуар с водой.
- Подключите трубку с силикагелем к U-образной трубке.
- Установите разъём датчика на другом конце трубки с силикагелем.

Примечания

1. Для монтажа или демонтажа необходимо повернуть разъём трубки с силикагелем.
2. Будьте осторожны при установке резинки из-за её сильной эластичности.
3. Проверьте установку перед экспериментом на случай утечки газа.
4. Перед экспериментом проверьте, можно ли подключить разъём датчика к датчикам. Замените разъём датчика, если он не может быть подключён.

Техническое обслуживание

- Храните установку в упаковочной коробке, когда она не используется.
- Протирайте пыль влажной мягкой тканью.
- Не царапайте установку острыми предметами.